



Adventurer® AX

Высокоточные аналитические и прецизионные весы



Самые универсальные весы в своем классе!

Весы серии OHAUS Adventurer, в которых идеально выдержан баланс между инновациями и простыми в использовании функциями взвешивания, располагают всем необходимым для повседневного взвешивания и измерений. Благодаря цветному сенсорному экрану, возможностями соблюдения нормативных требований GLP/GMP, наличию двух USB-портов, продуманной конструкции ветрозащитного кожуха и многому другому, весы серии Adventurer представляет собой самый лучший образец multifunctional приборов в своем классе.

Стандартный набор функций:

- Стабильность, точность и быстрое действие, необходимые для получения оптимальных результатов взвешивания - эти три характеристики обеспечивают важнейшие аспекты повседневного взвешивания в лаборатории.
- Цветной сенсорный экран и возможности подключения - ключ к современному взвешиванию: экран с большим углом обзора обеспечивает быстрый доступ ко всем приложениям, два USB-порта, соответствие нормам GLP/GMP, помогают в мониторинге и передаче данных на персональный компьютер.
- Компактный кожух для защиты от потоков воздуха делает работу удобнее - двухстворчатые дверцы ветрозащитного кожуха широко открываются с обеих сторон, благодаря чему освобождается большее пространство для размещения образца внутри ветрозащитного кожуха.

Гениально практично

www.ohaus-cis.ru

Adventurer® AX Аналитические и прецизионные весы

Стабильность, точность и быстродействие обеспечивают получение оптимальных результатов в повседневном взвешивании

- Характеристики взвешивания обеспечивают стабильные и надежные результаты повседневного взвешивания
- Малое время стабилизации Adventurer AX повышает производительность лаборатории
- В моделях с системой автоматической внутренней калибровки AutoCal™ выполняется регулярный контроль состояния весов и их точности, представляющий собой ежедневную авто калибровку весов по различным критериям.
- Традиционная внешняя калибровка, при которой оператор вручную калибрует весы по выбранной калибровочной гире, добиваясь точности, предусмотренной каждой моделью



Цветной сенсорный экран обеспечивает простое и быстрое управление функциями Adventurer AX

- Для доступа к девяти прикладным режимам Adventurer AX и многочисленным функциям, позволяющим обходиться без ручных расчетов, пользуйтесь современным цветным сенсорным экраном
- При работе с сенсорным экраном операторы могут надеть лабораторные перчатки, при этом устраняется неудобство и риск, связанный с необходимостью постоянно надевать и снимать перчатки
- Помимо сенсорного экрана, Adventurer имеет шесть механических клавиш с тактильной обратной связью, позволяющих оператору выполнять повторяющиеся действия, такие как тарирование, обнуление, калибровка и печать



Режимы взвешивания



Простое взвешивание
Определение веса образцов в выбранных единицах измерения.



Счет штук
Подсчет образцов одинакового веса.



Процентное взвешивание
Измерение веса образца в процентах от заданного эталонного веса.



Динамическое взвешивание
Взвешивание неустойчивой нагрузки. Весы регистрируют среднее значение за некоторый период.



Определение плотности
Определение плотности твердых тел и жидкостей. С помощью крюка для взвешивания под весами можно определять удельный вес предметов, которые невозможно установить на грузоприемную платформу.



Контрольное взвешивание
Сравнение веса образца с заданным значением.



Фиксация показаний дисплея
Индикация на экране последнего стабильного значения веса или самого большого его значения.



Суммирование
Подсчет суммарного веса для нескольких взвешиваний. Суммарное значение веса может превышать НПВ.



Рецептурное взвешивание
Для приготовления составов и рецептов. Количество ингредиентов может варьироваться от 2 до 50.

Функциональные возможности и способы передачи информации, необходимые в любой лаборатории

Два USB-порта

- Передний главный USB-порт удобно расположен и позволяет легко загружать профиль весов на флэш-накопитель без необходимости доставать до задней стороны весов или разворачивать весы
- Второй USB-порт расположен с задней стороны весов и может использоваться для подключения весов к компьютеру с целью передачи данных о взвешиваниях



Часы реального времени с данными GLP/GMP

- Функция часов реального времени фиксирует точное время даже при отключении питания, а возможность регистрации данных GLP позволяет записывать название образца, названия проектов и идентификаторы весов, что помогает соблюдать требования учета и нормативные требования протокола GLP

Профили весов

- Функция клонирования (копирования) позволяет сохранять настройки пользователя и приложения на носитель USB, чтобы затем использовать их для настройки других весов Adventurer

Индикация веса образца ниже минимума





- При использовании функции минимального веса на дисплее ясно указывается, что текущий образец имеет вес ниже заданного нижнего предела. Просто увеличьте вес образца, чтобы обеспечить соответствие результатов вашим стандартам

Ветрозащитный кожух для защиты от потоков воздуха делает работу простой и удобной

- Дверцы кожуха выполнены в виде двух стеклянных панелей и не занимают много места на лабораторном столе в открытом состоянии
- Широкий проем дверей (160 x 240 мм) обеспечивает свободный доступ и позволяет легко устанавливать на грузоприемную чашу большие весовые емкости, что снижает риск случайного разлива жидкости или просыпания образцов
- Легко поддерживать чистоту, обеспечивая безопасность рабочего места и сводя к минимуму загрязнение



Габаритные размеры

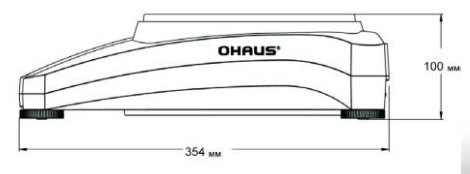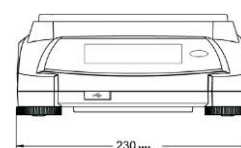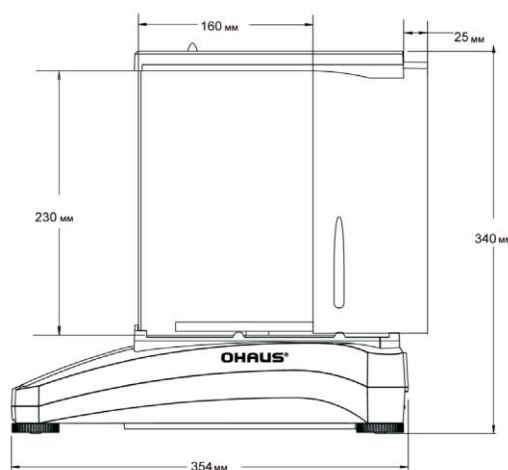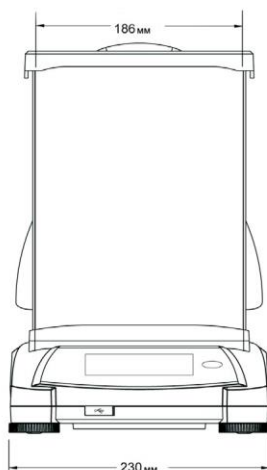

Модели с дискретностью 0.01 и 0.1 г

Модели с дискретностью 0.01, 0,1 и 1 мг

Adventurer® AX Аналитические и прецизионные весы

Модели	AX124	AX224	AX324	AX223	AX423	AX523	AX622	AX1502	AX2202	AX4202	AX5202	AX4201	AX8201
Внешняя калибровка	AX124/E	AX224/E	—	AX223/E	AX423/E	AX523/E	AX622/E	AX1502/E	AX2202/E	AX4202/E	—	AX4201/E	AX8201/E
НПВ (г)	120	220	320	220	420	520	620	1,520	2,200	4,200	5,200	4,200	8,200
Дискретность d (г)	0.0001			0.001			0.01					0.1	
Воспроизводимость (откл.), ≤5% от полной нагрузки (г)	0.00008			0.0008			0.008					0.08	
Воспроизводимость (откл.), 5% от полной нагрузки до полного диапазона (г)	0.0001			0.001			0.01					0.1	
Нелинейность типичная (г)	±0.00006			±0.0006			±0.006					±0.06	
Нелинейность (г)	±0.0002			±0.002			±0.02					±0.2	
Время стабилизации (сек)	≤3			≤2			≤1.5					≤1.5	
Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011	I			II			II					III	II
Мин. вес (типичный) (г) (USP, K=2, U=0.10%)	0.16			1.6			16					160	
Мин. вес (оптимальный) (г) (USP, K=2, U=0.10%, SRP≤0.41d)*	0.082			0.82			8.2					82	
Единицы измерения	грамм, миллиграмм, мегсаль, момм, ньютон, унция, пеннивейт, бат, карат, гран, фунт, таэль (Гонконг), таэль (Сингапур), таэль (Тайвань), тикаль, тола, тройская унция, пользовательская единица измерения (1)												
Режимы взвешивания	Простое взвешивание, подсчет штук, процентное взвешивание, контрольное взвешивание, динамическое взвешивание, составление рецептов, определение плотности, суммирование, фиксация показаний дисплея												
Размер чаши	Ø 90 мм			Ø 130 мм			175 × 195 мм						
Калибровка	Предусмотрена внутренняя калибровка AutoCal™, за исключением моделей AX.../E.												
Диапазон тарирования	До НПВ												
Требования к электропитанию	На входе сетевого блока питания: 100-240 В переменного тока, 0,3 А, 50-60 Гц. На выходе сетевого блока питания: 12 В постоянного тока, 0,84 А												
Тип дисплея	Полноцветный сенсорный графический жидкокристаллический дисплей WQVGA												
Размер дисплея	109 мм (диагональ)												
Размер корпуса весовой платформы (Ш x В x Г)	354 × 230 × 340 мм						354 × 230 × 100мм						
Интерфейсы	RS232, 2 x USB												
Диапазон температур	10° C to 30° C												
Диапазон влажности	Максимальная относительная влажность 80% при температуре до 30° C												
Условия хранения	От -10° C до 60° C при относительной влажности от 10% до 90% без конденсации												
Размер упаковки	507 × 387 × 531мм						557 × 392 × 301мм						
Собственная масса весов	5.1 кг			5.8 кг			4.6 кг					3.8 кг	
Масса весов в упаковке	7.8 кг			8.5 кг			6.5 кг					5.7 кг	

* Значение для SRP - стандартное отклонение для n повторных взвешиваний (n≥10)

Дополнительные возможности

Интерфейс RS232, встроенный крюк для взвешивания под весами, кожух для защиты корпуса весов, съемная чаша из нержавеющей стали, нижняя часть корпуса из литого металла, противоугонная скоба, передний индикатор уровня с подсветкой, четыре регулируемых опоры, меню разблокировки программного обеспечения, индикатор стабилизации, программные индикаторы недовеса и перевеса, выбор настроек окружающей среды, звуковой индикатор, регулировка яркости, автоматическое затемнение, калибровка сенсорного экрана, автоматическое тарирование, выбор языка пользовательского интерфейса (девять языков включая русский)

Сертификаты

Метрология: ГОСТ OIML R 76-1-2011, OIML R76, EN 45501 (класс I, nmax 320000; класс II, nmax 52000)
Безопасность изделия: EN 61010-1, IEC 61010-1
Электромагнитная совместимость: IEC 61326-1, EN 61326-1 (класс уровня излучения В, промышленные требования к помехоустойчивости)

Дополнительные принадлежности

Матричный принтер SF40A30045641
Дополнительный дисплей80251396
Комплект для определения плотности80253384
Кабель, USB-интерфейс (тип А или В).....83021085
“Противоугонное” устройство80850043
Кабель RS232, PC 25-контактный.....80500524
Кабель RS232, PC 9-контактный.....80500525

80774751_20220822 © Copyright OHAUS Corporation

МЕТАС
Официальный дилер Ohaus
Украина, 02090, г.Киев,
ул.Володимира Сосюри 68
+38 050-190-81-51
vesservice.kiev@gmail.com
www.ohaus.com.ua

***ISO 9001:2008**
Зарегистрированная система
управления качеством

