



Компактные анализаторы влаги с превосходными рабочими характеристиками просты в использовании и уходе

Компания OHAUS продолжает развивать успех анализаторов влаги MB35 и MB45 и выпустили на рынок новые анализаторы влаги общего назначения MB23 и MB25. Благодаря сочетанию высокого качества и долговечности анализаторы MB23 и MB25 обеспечивают получение точных результатов, а также простоту эксплуатации и технического обслуживания.

Основные характеристики

- Анализаторы OHAUS MB23 и MB25 обеспечивают получение точных результатов с высокой воспроизводимостью при разрешении 0,1% и 0,05% соответственно.
- **Простота использования.** Работать с анализатором очень просто. Просто нажмите и удерживайте кнопку температуры или времени, чтобы задать параметры сушки, затем положите образец и начните процесс сушки. Благодаря простоте использования анализаторы MB25 и MB23 отлично подходят для решения повседневных задач, выполняемых операторами любой квалификации.
- **Удобная конструкция.** Анализаторы OHAUS MB25 и MB23 занимают небольшую площадь - 17 x 13 x 28 см. Удобная для чистки нагревательная камера не создает для оператора трудностей при повседневном проведении технического обслуживания.

Анализаторы влажности MB23 и MB25

Модель	MB25	MB23
НПВ	110 г	
Воспроизводимость (СКО)	0,2% (образец 3 г) 0,05% (образец 10 г)	0,3% (образец 3 г) 0,2% (образец 10 г)
Разрешение	0,05% (0,005 г)	0,10% (0,01 г)
Объем выборки	От 3 г до 20 г (типичное значение); минимум 0,5 г	
Выходной сигнал	RS-232 (двунаправленный)	
Таймер	1-99 минут с шагом от 30 секунд до 60 минут	
Технология нагревания	Галогенная	Инфракрасная
Диапазон температур	От 50°С до 160°С с шагом 5°С	
Электропитание	100-240 В, 50/60 Гц	
Диапазон тарирования	До НПВ	
Диапазон рабочих температур	От 5° до 40°С (от 41° до 104°F)	
Тип дисплея	Специальный ЖК-дисплей с подсветкой	
Отображаемые параметры	%влаги, % сухого остатка или вес (г), темп., время	
Диаметр чашки весов	90 мм	
Размеры (Ш x В x Г)	17 x 13 x 28 см	
Собственный вес	2,3 кг	
Вес в упаковке	3,9 кг	
Принадлежности (входят в комплект)		
Чашки для образцов, 50 шт.	Стандартные	
Защитный чехол	Стандартный	
Держатель чашки весов	Стандартный	Специальный (PN 802524776)



Соответствие требованиям


- Безопасность продукции: IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-2-010
- Электромагнитная совместимость: IEC/EN 61326-1 Класс В, основные среды

Дополнительные части и принадлежности

Номер Ohaus

Противоударное устройство	80850043
Температурный калибровочный набор	11113857
Чашки для образцов (50 шт. в коробке)	30585411
Стекловолоконные диски (200 шт. в коробке)	80850087
Многоразовые чашки для образцов (3 шт. в упаковке)	80252478
Многоразовые глубокие чашки для образцов (3 шт. в упаковке)	80252479
Многоразовая проволочная экранирующая сетка	80252477
Держатель чашки весов	80252476
Защитный чехол для клавиатуры	80252475
Матричный принтер SF40A	30045641
Интерфейс RS323-USB	30304101

Размеры

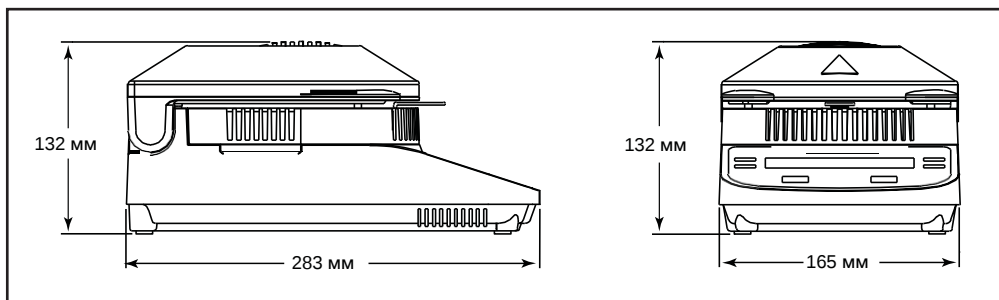

80776296 20221222_B © Copyright OHAUS Corporation

МЕТАС

Официальный дилер Ohaus
Украина, 02090, г.Киев,
ул.Володимира Сосюри 68
+38 050-190-81-51
vesservice.kiev@gmail.com
www.ohaus.com.ua
ISO 9001:2015
Зарегистрированная система
управления качеством

